


Guide d'utilisation

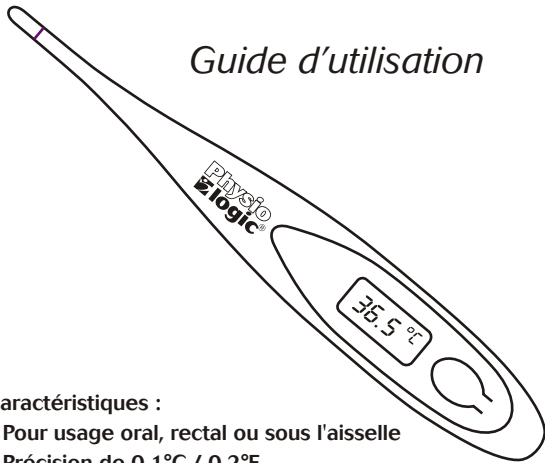


Caractéristiques :

- Pour usage oral, rectal ou sous l'aisselle
- Précision de 0,1°C / 0,2°F
- Affiche en Celsius
- Mémoire de la dernière prise de mesure
- Signal sonore discret indiquant la température maximale
- Résistant à l'eau, il se lave facilement
- Arrêt automatique qui épargne la pile
- Étui inclus

Nous vous remercions d'avoir choisi le thermomètre Physio Logic<sup>®</sup> DiGiPro<sup>MC</sup>. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

Caractéristiques du thermomètre numérique flexible DiGiPro<sup>MC</sup>

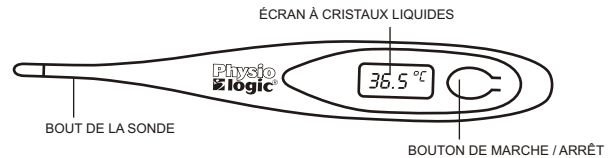

**Consignes de nettoyage :** Nettoyer avec un linge doux imbibé d'une des solutions suivantes, puis ranger le thermomètre dans son étui en plastique. Toute autre méthode de nettoyage peut endommager le thermomètre.

Solution	Dilution	Méthode
Alcool isopropylique	70% - 90%	Essuyer avec un chiffon imbibé
Alcool éthylique	70% - 80%	Essuyer avec un chiffon imbibé (ne pas tremper)
Hypochlorite de sodium	0.02% - 0.05%	Tremper jusqu'à 30 minutes
Gluconate de chlorhexidine	0.1 % - 0.5%	
Chlorure de benzéthonium	0.1%	
Chlorure de benzalkonium	0.1%	
Aldéhyde glutarique	0.5% - 2%	
Alkylpolyaminoéthylglycine	0.05% - 0.2%	

Comment prendre la température


1. Nettoyer et désinfecter le thermomètre tel que décrit ci-dessus.
2. Déterminer la méthode de prise de lectures (rectale, buccale ou axillaire).
3. Si désiré, couvrir le bout du thermomètre d'un protège-sonde stérile. ( facultatif )


**Note:** Le temps requis pour la prise de mesure varie selon la méthode choisie.

Prise de mesure par la méthode buccale

Durée approximative : 60 secondes.

**Note:** boire, faire des exercices, fumer ou effectuer d'autres types d'activités peut influencer la prise de température. Il est recommandé de garder le patient au repos au moins 5 minutes - avec la bouche fermée - avant d'effectuer une prise de mesure.

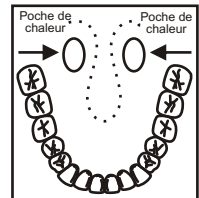

1.  Appuyer sur le bouton de marche/arrêt. Le thermomètre affichera les symboles ci-contre indiquant qu'il est prêt. Le « °C » se met à clignoter lorsque le thermomètre est en lecture.
2. Placer le bout de la sonde sous la langue aussi près que possible d'une des poches de chaleur. Garder la bouche du patient fermée et ne pas faire bouger le thermomètre.
3. Dès que le symbole « °C » cesse de clignoter, (après environ 60 secondes), la température maximale détectée est affichée.

**Note:** L'affichage de la température peut augmenter – même lorsque le « °C » cesse de clignoter – si le thermomètre est déplacé vers un endroit plus chaud. Si cela se produit, laisser quelques secondes afin que le thermomètre se ré-stabilise.

**Note:** Il est important de garder la bouche du patient fermée lors de la prise de mesure afin d'éviter une lecture trop basse ou une durée prolongée de la prise de mesure.

### Prise de mesure par la méthode rectale

Durée approximative de la prise de mesure : 30 secondes.

**Note:** Cette méthode est utilisée pour prendre la température chez les bébés et les jeunes enfants, ou lorsqu'il est impossible ou difficile de la prendre autrement.

1.  Appuyer sur le bouton de marche/arrêt. Le thermomètre affichera les symboles ci-contre indiquant qu'il est prêt. Le « °C » se met à clignoter lorsque le thermomètre est en lecture.


- Étendre un lubrifiant soluble à l'eau sur le bout de la sonde et insérer doucement le bout de la sonde dans le rectum - MAXIMUM 1,25 cm (1/2").
- Dès que le symbole « °C » cesse de clignoter, (après environ 30 secondes), la température maximale détectée est affichée.

**Note:** La température relevée peut augmenter – même après les 4 bips – si le thermomètre est déplacé vers un endroit plus chaud du corps. Si cela se produit, laisser le thermomètre en place pendant quelques secondes afin qu'il se stabilise à nouveau et affiche la prise de température finale.

**Note:** Les résultats obtenus par cette méthode sont généralement 0,6°C (1°F) plus haut que ceux obtenus une prise de mesure buccale.

### Prise de mesure par la méthode axillaire

Durée approximative de la prise de mesure : 101 secondes.

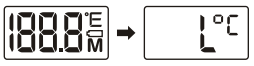- Bien essuyer l'aisselle à l'aide d'une serviette sèche.
-  Appuyer sur le bouton de marche/arrêt. Le thermomètre affichera les symboles ci-contre indiquant qu'il est prêt. Le « °C » se met à clignoter lorsque le thermomètre est en lecture.
- Placer le bout de la sonde sous le bras afin qu'elle touche la peau et que le thermomètre soit perpendiculaire au corps.
- Rabattre le bras sur la poitrine de telle sorte que l'air ambiant n'affecte pas la prise de mesure.
- Dès que le symbole « °C » cesse de clignoter, (après environ 101 secondes), la température maximale détectée est affichée.

**Note:** La température relevée peut augmenter – même après les 4 bips – si le thermomètre est déplacé vers un endroit plus chaud du corps. Si cela se produit, laisser le thermomètre en place pendant quelques secondes afin qu'il se stabilise à nouveau et affiche la prise de température finale.

**Note:** Les résultats obtenus par cette méthode sont généralement 0,6°C (1°F) plus bas que ceux obtenus par une prise de mesure buccale.

### Pour fermer le thermomètre

Pour fermer l'appareil, appuyer sur le bouton de marche / arrêt. Toutefois, le thermomètre s'arrêtera de lui-même après 6 minutes d'inactivité.

### Rappel de mémoire

Pour voir la dernière température relevée, il suffit de tenir le bouton de marche / arrêt environ 2 secondes lors de la mise en marche du thermomètre. Il affichera d'abord tous les symboles, puis la dernière température relevée.

### Entretien général

- Bien nettoyer le thermomètre avant et après utilisation.
- Entreposer dans son étui et éviter les températures extrêmes.
- Ne pas mordre le thermomètre.
- Garder à l'abri du soleil, de la poussière et de l'humidité.
- Ne pas échapper, éviter les chocs.
- Ne pas démonter
- Le thermomètre ne doit être utilisé que sous la supervision d'un adulte.
- Ne pas marcher, parler ni courir pendant une prise de mesure.

### Caractéristiques

Écran :	Affichage à cristaux liquides
Résolution d'affichage :	4 chiffres (incluant la décimale)
Étendue de mesure :	de 32°C à 44°C
Précision :	± 0,1°C entre 35,0°C 39,0°C, ± 0,2°C hors de ces balises
Mesure moyenne :	Buccale : 60 secondes, rectale : 30 secondes, axillaire : 101 secondes
Tonalité :	Un bip léger lors de la marche/arrêt. Une série de quatre bips signale l'atteinte de la température maximale
Mémoire :	Affiche la dernière température mesurée
Pile :	Une, 1,55V, alcaline Manganese LR41 ou Ucc 192
Durée de la pile :	Environ 90 heures (continu) ou environ 18 mois (10 minutes par jour)
Arrêt automatique :	Après environ 10 minutes
Température de service :	Entre 0°C et 50°C (humidité : 10 % ~ 83 %)
Dimensions :	12,6 cm x 1,8 cm x 1,0 cm
Poids :	7 grammes (incluant la pile)

*Caractéristiques sujettes à changements sans préavis.*

*Pour plus de renseignements, visitez [www.amgphysiologic.com](http://www.amgphysiologic.com)*